

ЛКС

лабораторная
и промышленная техника

VIBRA®

Measure the Future

IP65



СЕРИЯ FS

Высокоточные лабораторно-
промышленные
пылевлагозащищенные
весы

Функции:

- Процентное взвешивание
- Суммирование
- Режим сравнения
- Режим дозатора

ГАРАНТИЯ 7 ЛЕТ

Высокая точность в промышленном взвешивании



Банки и
финансовый сектор



Использование в
условиях жесткой
эксплуатации



Нефтегазовая
отрасль



Пищевые
производства



Производство
лакокрасочных изделий



Химическое
производство

Модель	FS 620CE- i02 (i03)	FS 3200CE- i02 (i03)	FS 6200CE- i02 (i03)	FS 15000CE- i02 (i03)	FS 30KCE- i02 (i03)	FS 60KCE- i02 (i03)	FS 100KCE- i02 (i03)	FS 200KCE- i02 (i03)	FS 150KFCE- i02 (i03)	FS 300KFCE- i02 (i03)
Мах, кг	0,62	3,2	6,2	15	30	60	100	200	150	300
Дискретность, г	0.001	0.01		0.1			1			
Класс точности	Высокий (II)									
Калибровка	Внешняя									
Пыле- влагозащита	IP65									
Размер платформы, мм	Ø 140	190×190		310×330		380×530		800×600		

Преимущества технологии Tuning-Fork



Использование датчика Tuning-Fork в весах ViBRA серии FS дает пользователю уникальные преимущества:

- Быстрое начало работы – вход в рабочий режим в течение 1 минуты;
- Высокая точность и воспроизводимость результатов;
- Экстремально низкая зависимость от температуры окружающей среды;
- Устойчивость к перегрузу (в 15 раз).

Уникальное предложение 300 кг x 1г

Высокая точность на большом пределе взвешивания 300 кг x 1 г - решение любых технических задач на одних весах.

Максимальный размер платформы в лабораторном взвешивании

Весы ViBRA серии HJ позволяют измерять вес и плотность больших и негабаритных образцов с помощью поддонного крюка. Это уникальная характеристика для лабораторных весов данного класса.

2 варианта исполнения блока индикации

В стандартную комплектацию весов ViBRA серии FS на выбор входит два вида блока индикации:


- Стандартный с одним дисплеем;
- С дополнительными двумя дисплеями, на которых можно установить пределы взвешивания (верхний и нижний), вес тары, полный вес и т.д.

Корпус из нержавеющей стали с классом защиты IP65

Износостойкий корпус, полностью изготовленный из нержавеющей стали, в комплексе с классом защиты IP65 позволяет получать высокоточные результаты измерений в жестких условиях эксплуатации.


2 варианта питания в стандартной комплектации

Сетевой адаптер с разъемом по IP65 и сухие батареи R14P, что позволяет использовать весы в выездной работе и при отсутствии стационарного питания.

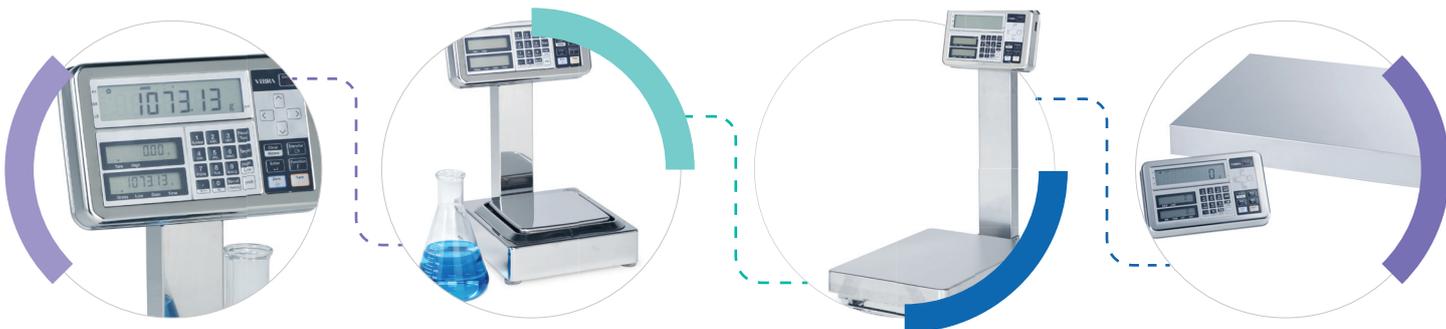


ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ


FS 623

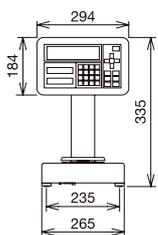


FS 3202-FS 15001

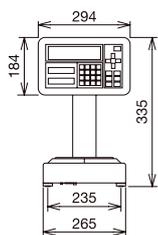




FS 30K0.1G

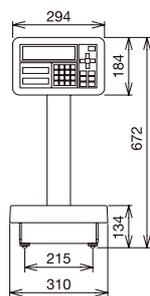

FS 60K0.1G-FS 200K1G

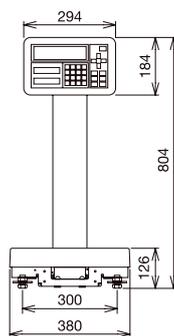

FS 150K1GF

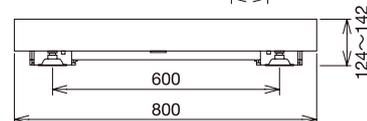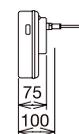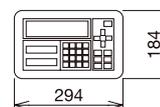

FS 300K1GF

ОПЦИИ

- FSPK - Напольная стойка дисплея для FS/FZ
- FSDS - Выносная подставка для дисплея
- FSTI - Интерфейс TCP-IP для FS/FZ
- FSLM - Контакт реле для FS/FZ (заводская опция)
- FSRS - Интерфейс RS-323C для FS/FZ
- FSR4 - Интерфейс RS-422A для FS/FZ
- FSSC - Удлиненный кабель (до 20м)
- FSWS (S) - Ветрозащита маленькая для FS/FZ 623
- FSWS (M) - Ветрозащита средняя для FS/FZ 623
- FSWS (L) - Ветрозащита большая для FS/FZ 623



ЛКС

лабораторная
и промышленная техника

www.lks.ru
www.labmebel.ru

ООО "ЛКС"
Официальный дилер.
Поставки по России.

т.ф. (495) 225-25-95 (многоканальный)

8-800-250-09-09 (бесплатный
звонок с любого телефона России)

109202, г. Москва,
ул. 1-я Фрезерная, д. 2/1, стр. 41